

# **LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS**

Atelier de formation des Personnels  
de Laboratoire

Thies 17 Juillet 2014

# INTRODUCTION

- Le Personnel travaillant sur des cas suspects, confirmés et/ou en isolement dans des zones à haut risque doit disposer d'un Equipement de Protection spécifique: EPI;
- Il doit connaitre le protocole d'habillage et de déshabillage;
- Il existe différents modèles d'EPI sur le terrain;
- Il est primordial de disposer des EPI de qualité (standard MSF) et de former le personnel à son utilisation.

**METTRE LES VETEMENTS DE  
PROTECTION INDIVIDUELLE**

# 1<sup>ère</sup> Etape



- Mettre le vêtement de travail

## 2<sup>ème</sup> Etape



- Mettre les Bottes de caoutchouc

## 3<sup>ème</sup> Etape



- Mettre la première paire de gants

## 4<sup>ème</sup> Etape



- Mettre la blouse

# 5<sup>ème</sup> Etape



- Mettre le tablier de plastique ou de caoutchouc

## 6<sup>ème</sup> Etape



- Enfiler la seconde paire de gants au dessus des poignets de la blouse

# 7<sup>ème</sup> Etape



- Mettre le masque

## 8<sup>ème</sup> Etape



- Mettre le calot

## 9<sup>ème</sup> ETAPE



- **Mettre les lunettes de protection.**

# Habillez vous toujours à deux!!!



**ENLEVER LES VETEMENTS DE  
PROTECTION**

# DESINFECTION DES OBJETS EXTERNES



**1** Désinfecter les gants extérieurs



**2** Désinfecter le tablier et les bottes

# ENLEVER LES OBJETS EXTERIEURS



**3** Enlever les gants extérieurs.



**4** Ôter le tablier.

# ENLEVER LES OBJETS EXTERNES (Suite)



- Oter la Blouse Externe

## 2<sup>nde</sup> DESINFECTION



**6** Désinfecter les mains gantées.

- DESINFECTER LES MAINS GANTEES

# ENLEVER LES OBJETS DE LA TETE

8 Ôter le calot.



7 Ôter les lunettes.



# OBJETS DE LA TÊTE (Suite)




- 9 Ôter le masque.

# OTER LES OBJETS DES MEMBRES



**10** Enlever les bottes.

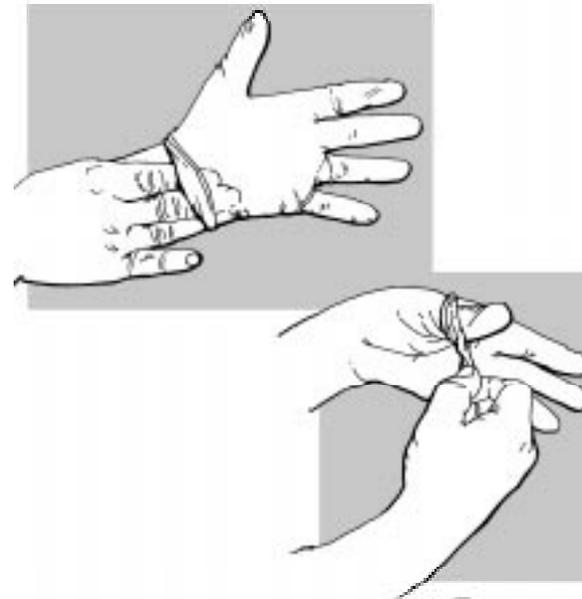

**11** Enlever la paire de gants internes.

# DESINFECTION TERMINALE



- 12 Laver les mains à l'eau et au savon.

# SORTIE SALLE EBOLA

